



Mindrium

빠른 사용 매뉴얼

인지행동치료(CBT) + 응용이완훈련(Applied Relaxation) 기반
디지털치료 앱

- 1 시작하기**
회원가입, 권한, 사전 설문을 완료합니다.
- 2 매일 하기**
홈에서 오늘의 할 일과 교육/이완을 확인합니다.
- 3 불안할 때**
SUD 점수, 걱정 일기, 이완 또는 대체 생각으로 이어갑니다.
- 4 돌아보기**
보관함과 리포트에서 진행 상황을 확인합니다.



v2.1.1 기준

첫 실행은 가입, 권한, 사전 설문만 차례로 진행하면 됩니다.

병원/연구진에게 받은 코드와 안정적인 네트워크를 준비해 주세요.



로그인

회원가입

사전 설문

1. 회원가입 또는 로그인

가입 정보와 마인드리움 코드를 입력합니다.

2. 약관과 권한 확인

알림과 위치 권한은 알림/지도 기능에 필요합니다.

3. 튜토리얼 확인

앱의 목적과 기본 사용 흐름을 짧게 확인합니다.

4. 사전 검사 완료

PHQ-9, GAD-7 문항을 끝내면 홈으로 이동합니다.

비밀번호와 코드는 타인에게 공유하지 마세요.

홈은 오늘 할 일과 빠른 불안 완화 입구를 한눈에 보여줍니다.

하단 탭은 홈, 교육, Mindrium, 리포트, 마이페이지 5개 영역으로 구성됩니다.



오늘의 홈

홈에서 먼저 볼 것

오늘의 할 일: 일기, 이완, 교육 진행 상태
불안 완화 알림: 자주 불안한 시간/장소 설정
위젯 안내: 앱을 열지 않고 Relief로 진입
하단 탭: 기록 확인과 설정으로 빠르게 이동

초보자 기본 루틴

- 1 오늘의 할 일 열기**
완료하지 않은 활동이 있는지 확인합니다.
- 2 일기 또는 이완 진행**
앱이 안내하는 순서대로 하나씩 완료합니다.
- 3 필요할 때 불안 완화**
알림이나 위젯으로 바로 Relief 활동을 시작합니다.

교육 탭에서는 8주 CBT와 이완 훈련을 주차별로 진행합니다.

각 주차는 교육 활동과 이완 연습을 함께 반복하도록 구성됩니다.



교육 탭

1주 불안 이해 점진적 이완	2주 ABC 일기 점진적 이완	3주 생각 구분 이완만 하는 이완	4주 생각 점검 신호 조절 이완
5주 행동 선택 차등 이완	6주 행동 돌아보기 차등 이완	7주 행동 개선 신속 이완	8주 여정 정리 신속 이완

팁 이번 주차 교육을 먼저 본 뒤, 홈의 일일 기록과 이완을 반복하면 흐름이 가장 자연스럽습니다.

걱정 일기는 불안을 상황, 생각, 결과로 정리하는 기본 기록입니다.

칩을 선택하거나 직접 추가해 지금의 경험을 짧게 남기면 됩니다.



Activating Event

불안이 시작된 상황



Belief

그때 떠오른 생각



Consequence


감정, 신체 반응, 행동

기록은 나중에 유사한 불안 상황을 고르고 대체 생각을 만드는 데 다시 사용됩니다.



불안이 올라오면 먼저 점수를 고르고, 활동 후 다시 변화를 확인합니다.

SUD 점수는 0-10점 사이에서 지금 느끼는 불안 정도를 표시합니다.

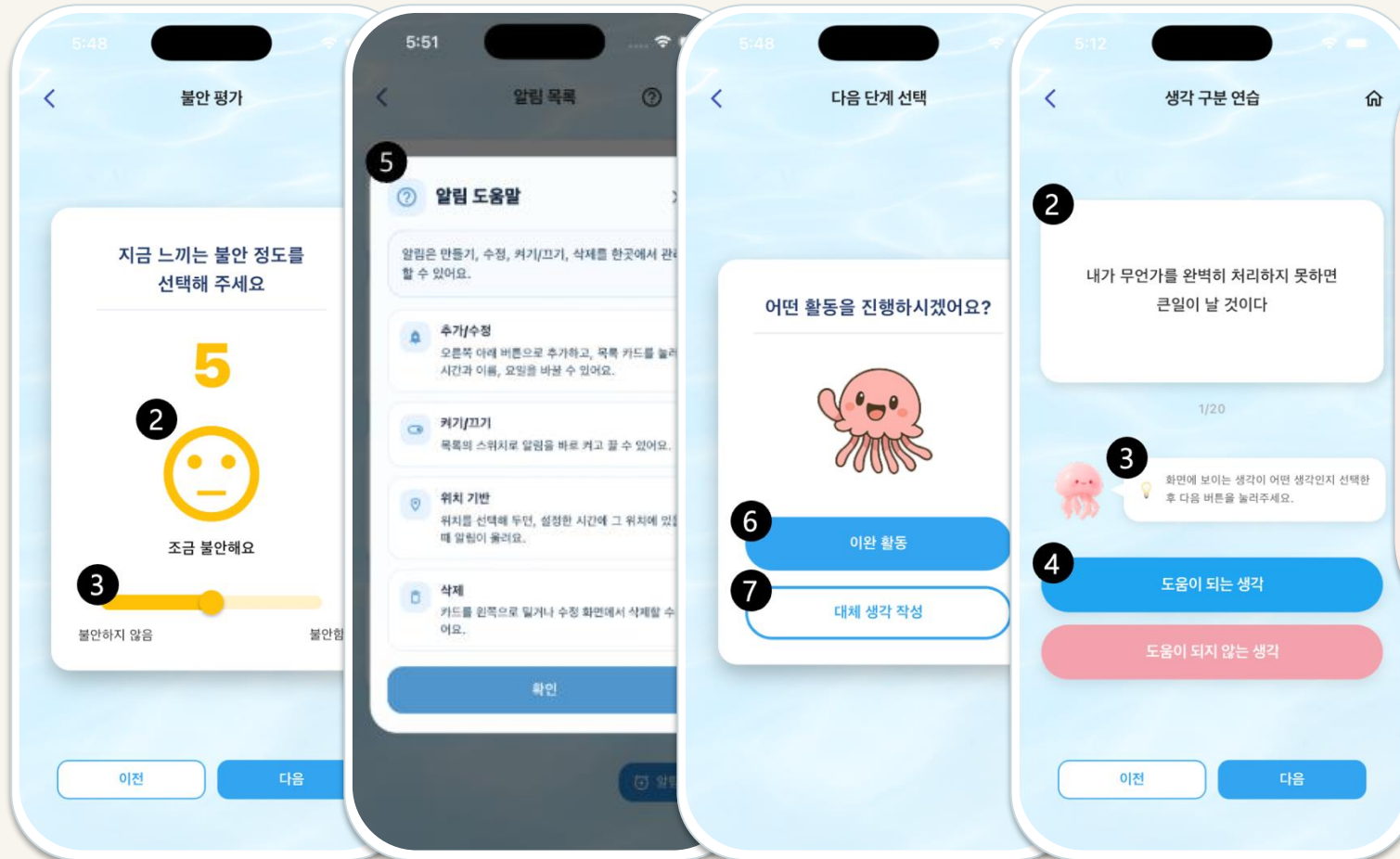

불안 점수

도움말

이완/생각 선택


생각 구분

활동 순서

- 1 점수 선택**
현재 불안 정도를 0-10점으로 고릅니다.
- 2 기존 일기 또는 새 일기**
지금 상황과 가까운 기록을 선택합니다.
- 3 이완 또는 대체 생각**
몸을 먼저 낮추거나 생각을 다시 살펴봅니다.
- 4 종료 점수**
활동 후 불안이 어떻게 바뀌었는지 확인합니다.

알림과 위젯은 불안이 생기는 시간과 장소에 맞춰 빠르게 시작합니다.


반복되는 불안은 미리 알림을 만들고, 갑작스러운 불안은 홈 위젯으로 바로 들어갑니다.

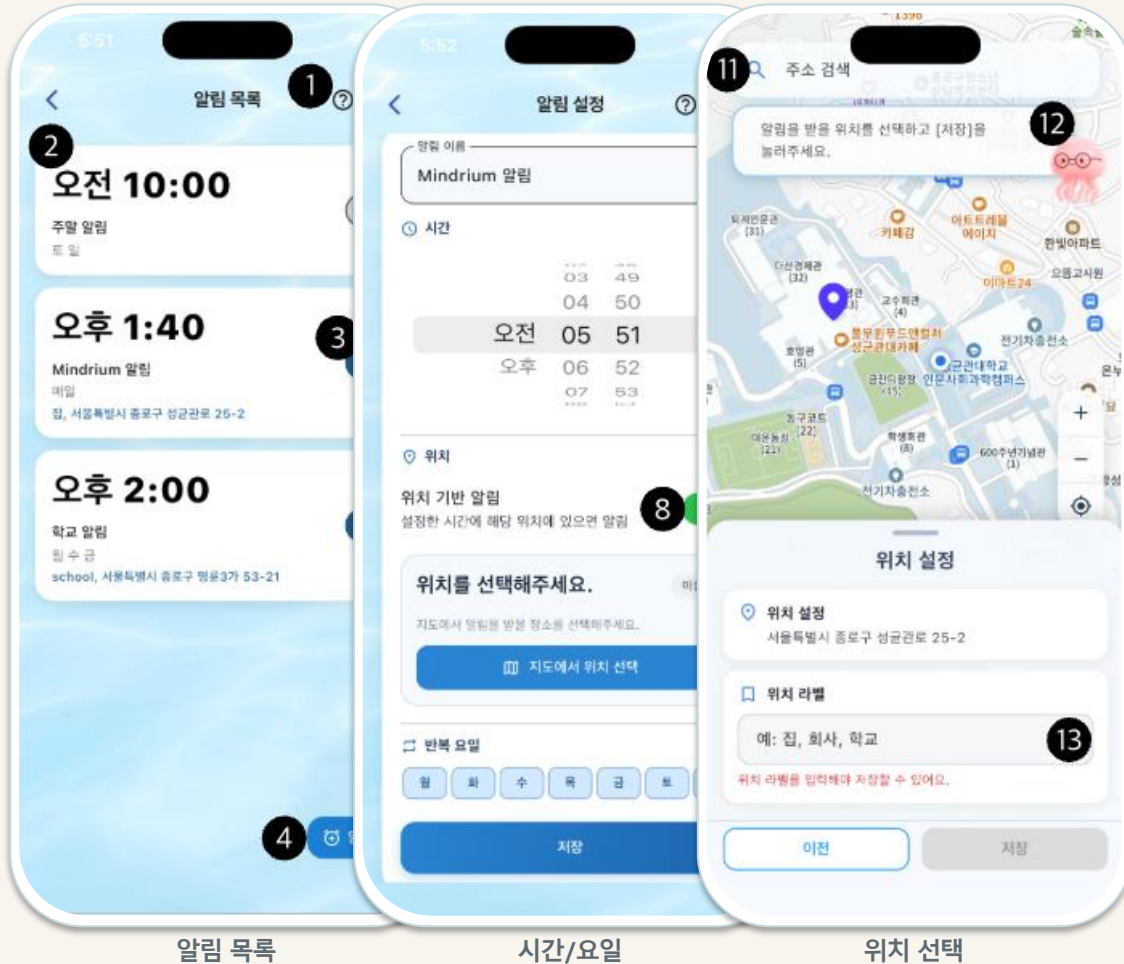

알림 만들기

알림 이름
시간
반복 요일
위치 조건

수면, 운전, 회의 시간은 피해서 설정

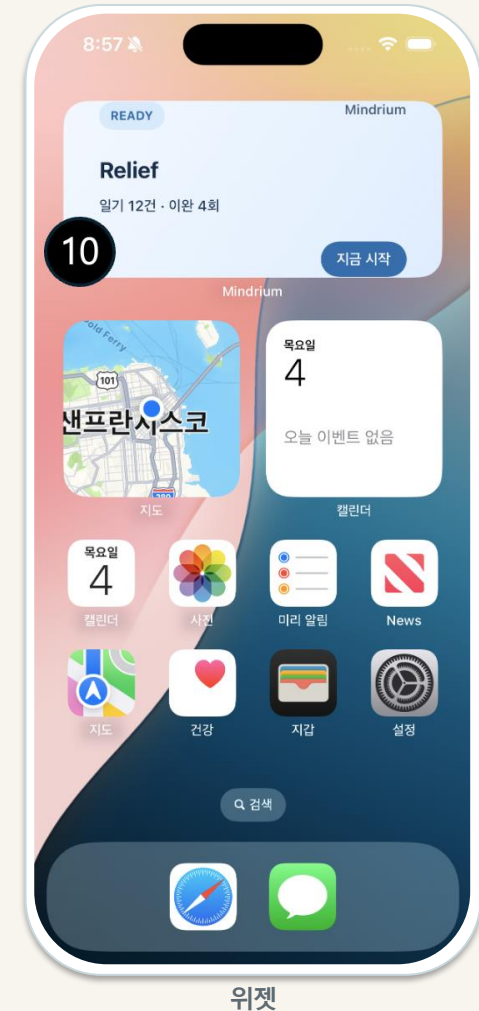

보관함은 걱정 그룹을 캐릭터로 보여줘 진행을 눈으로 확인하게 합니다.

걱정을 내 안의 막연한 감정이 아니라 관찰하고 돌볼 수 있는 대상으로 바꿔 보여줍니다.



리포트와 마이페이지에서 수행률, SUD 변화, 설정을 확인합니다.

기록은 치료 활동을 돌아보기 위한 참고 정보이며, 진단이나 의학적 판단의 근거로 쓰지 않습니다.



확인할 수 있는 것

주간 캘린더와 활동한 날
나의 불안 변화와 SUD 흐름
교육, 이완, 일기 수행률
계정, 리마인더, 권한 관련 설정

오류나 데이터 이상이 있으면 관리자에게 문의

E-mail: Mindriumapp@gmail.com

처음 7일은 이 체크리스트만 따라가도 충분합니다.

너무 완벽하게 쓰려 하기보다, 짧게라도 반복해서 남기는 것이 중요합니다.

매일

- 집에서 오늘의 할 일 확인
- SUD 점수 기록
- 걱정 일기 작성
- 이완 훈련 1회

불안할 때

- 알림이나 위젯으로 Relief 시작
- 기존 일기 선택 또는 새 일기 작성
- 이완/대체 생각 후 점수 다시 기록

주 1회

- 교육 탭에서 이번 주차 교육 확인
- 리포트에서 수행률과 변화 확인
- 알림 시간과 위치가 적절한지 조정

주의 기록과 점수는 치료 참여를 돕는 참고 정보입니다. 의료진 상담 없이 진단이나 치료 판단의 근거로 사용하지 마세요.